


품목신고번호	수신 21-17778호
품목명	교정용겸자
모델명	RR-1TSB, RR-1TSG, RR-1TSO, RR-1TSP, RR-1W
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층 (문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona Orthodontics
사용목적	치과 교정용 재료를 보호 유지하거나 금속편 또는 와이어를 굴곡 하기 위해 사용하는 기구로서 치아의 접착제를 제거하거나 치아와 교정용 재료를 분리하는 경우에도 사용된다.
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 1. 열성형 교정장치 또는 유지장치를 착용한 환자에게 적용합니다. 나. 사용방법 1. 유지장치 리트리버의 구멍이 있는 끝부분(A)을 잡으십시오. 2. 유지장치 리트리버의 구부러진 끝부분(B)을 입에 삽입하십시오. 3. 갈고리를 사용하여 입 앞쪽에 있는 유지장치 또는 교정장치의 가장 자리를 부드럽게 잡고 치아에서 빼내십시오. 4. 저항이 느껴지면 치아를 따라 여러 위치에서 3단계를 반복 해야할 수 도 있습니다. 그러나 과도한 힘을 사용하여 유지장치 또는 교정장치를 제거 하지 마십시오. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 1. 본 제품은 일회용이므로 사용된 제품은 재사용하지 않습니다. 2. 사용한 칫솔이나 치실을 버릴 때처럼 일반 가정용 쓰레기통에 버리십시오.	
사용 시 주의사항 경고 - 단일 환자 전용 - 교정장치나 유지장치를 제거하기 위해 과도한 압력을 가하면 손상될 수 있습니다. 주의 사항 - 다른사람에게이제품을재사용하지마십시오. 재사용위험에는감염및오염이포함됩니다 (예: 박테리아, 바이러스). - 장치와 관련하여 심각한 사고가 발생하면 담당 의료전문가나 장치 제조업체 및/또는 거주국가의관할당국 또는기타 해당 규제기관에 보고하십시오	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.09
보관 또는 저장방법	1. 본 제품은 일회용이므로 사용된 제품은 재사용하지 않습니다. 2. 사용한 칫솔이나 치실을 버릴 때처럼 일반 가정용 쓰레기통

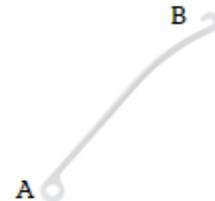

	에 버리십시오.
제조번호	제조사 표시사항 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
본 제품은 일회용 의료기기임 재사용 금지	